

Changez votre patient 1 fois par jour avec l'étui pénien Conveen® Optima**

VU À LA TÉLÉ

ARBRE DÉCISIONNEL

1) Choix de l'étui pénien Conveen Optima


A/ Diamètre :

Mesurer à l'endroit le plus large du pénis.

B/ Longueur :

Pénis ≤ 5 cm → Conveen Optima Specific

Pénis > 5 cm → Conveen Optima (version standard)

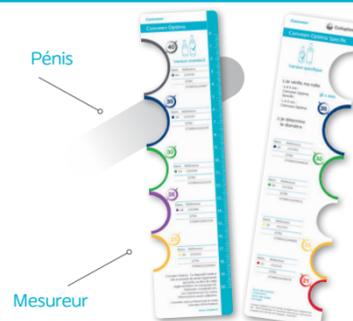

Version	Longueur	Réf	Diamètre					
			● 21	● 25	● 28	● 30	● 35	● 40
Conveen Optima* Longueur de l'étui 7,8 cm Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs sans latex	Longueur de l'adhésif 4 cm			220250	220280	220300	220350	220400
Conveen Optima Specific* Longueur de l'étui 4,6 cm Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs sans latex	Longueur de l'adhésif 3,5 cm		221210	221250		221300	221350	

2) Choix de la poche à urine Conveen

Poches de jour			Poches de nuit		
Incontinence légère à modérée*** (<250 ml) 1/2 VERRE Conveen Active* Boîte de 30 poches avec système d'attaches intégré Référence: 255020 Conveen Active 250 ml tub. 7 cm ajustable	Incontinence modérée*** (250 à 750 ml) 1 VERRE Conveen 0,5 l' ou 0,75 l' Boîte de 30 poches graduées Référence: Conveen 0,5 l 051600 tub. crénelée 30 cm ajustable Conveen 0,5 l 051610 tub. crénelée 50 cm ajustable Conveen 0,75 l 051670 tub. crénelée 50 cm ajustable	Incontinence sévère*** (> 750 ml) ou patient mobilité réduite 3 VERRES Conveen 1,5 l' Boîte de 30 poches graduées Référence: 050620 Conveen 1,5 l 050620 tub. lisse 90 cm ajustable	Pour limiter le nombre de vidange PERSONNE ALITÉE OU NUIT Conveen 2 l' Boîte de 30 poches graduées Référence: 213460 Conveen 2 l 213460 tub. crénelée 140 cm ajustable	Conveen 1,5 l' Boîte de 30 poches graduées Référence: 050620 Conveen 1,5 l 050620 tub. lisse 90 cm ajustable	
3) Choix des solutions de maintien ou de stabilisation de la poche			Solutions de stabilisation des poches de nuit		
Solutions de maintien des poches de jour Conveen Attaches de jambe* Vendues à la paire, conditionnées par boîte de 10 Référence: 050501			Conveen Filets* Boîte de 2 filets Taille / Circonférence Référence ● Standard / 40-60 cm 783681 ● Medium / 45-65 cm 783687 ● Large / 55-85 cm 783695		
			Conveen Porte-poche de lit Vendu à l'unité, conditionnés par boîte de 10 Référence: 050700		Conveen Porte-poche de sol Vendu à l'unité Référence: 380431



Une question ? Besoin d'aide ? connectez-vous sur : pro.coloplast.fr

Votre représentant Coloplast se tient à votre disposition :

* Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire.

**CODIMS AP-HP, Comité du Dispositif Médical. Recommandations du Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le sondage vésical. Déc 2009; Page 43.

*** Définition de l'incontinence modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al.

PRODUITS DESTINÉS À L' INCONTINENCE URINAIRE MASCULINE : Conveen, Conveen Optima, Conveen Active : Dispositifs médicaux de classe I, marqués CE. Fabricant : Coloplast A/S.

Lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.