

Certaines stomies ont besoin de plus de protrusion

Pour les patients stomisés, les fuites, en plus d'être source de complications cutanées¹, peuvent être une cause majeure d'anxiété².

L'**anneau protecteur Brava** est conçu pour offrir un meilleur ajustement de l'appareillage avec la peau. Cependant, certaines stomies ont besoin de plus de protrusion.

L'**anneau protecteur convexe Brava** est une solution adaptée pour créer cette convexité nécessaire⁴.

Anneau protecteur Brava®



Conçu pour prévenir les fuites* et protéger la peau péristomiale³.

Anneau protecteur convexe Brava® Nouveau



Conçu pour prévenir les fuites* et protéger la peau péristomiale des patients présentant une stomie plane, rétractée ou à proximité de plis, creux ou cicatrices⁴.

* en créant un joint étanche entre la peau péristomiale intacte et le support adhésif.

Nouveau Anneau protecteur convexe Brava®

L'anneau protecteur convexe Brava combine les bénéfices de l'adhésif SenSura® Mio et de l'adhésif de l'anneau protecteur Brava pour une bonne efficacité.

L'adhésif de l'anneau protecteur Brava®

- Haute adhérence, comble même les plus petits plis⁵
- Respectueux de la peau⁶

L'adhésif SenSura® Mio


- Adhésif résistant aux effluents agressifs⁷
- Grande flexibilité pour assurer une protection pendant les mouvements⁸

Conçu pour une bonne adaptation

- Le bord central épais est conçu pour créer une convexité à la zone péristomiale
- Le bord périphérique mince épouse la zone péristomiale

Modelable avec un bon maintien


- Modelable pour s'adapter aux différentes formes de stomies, latérales (ovales) et terminales (rondes)
- Maintien de la convexité après avoir modelé l'anneau⁹

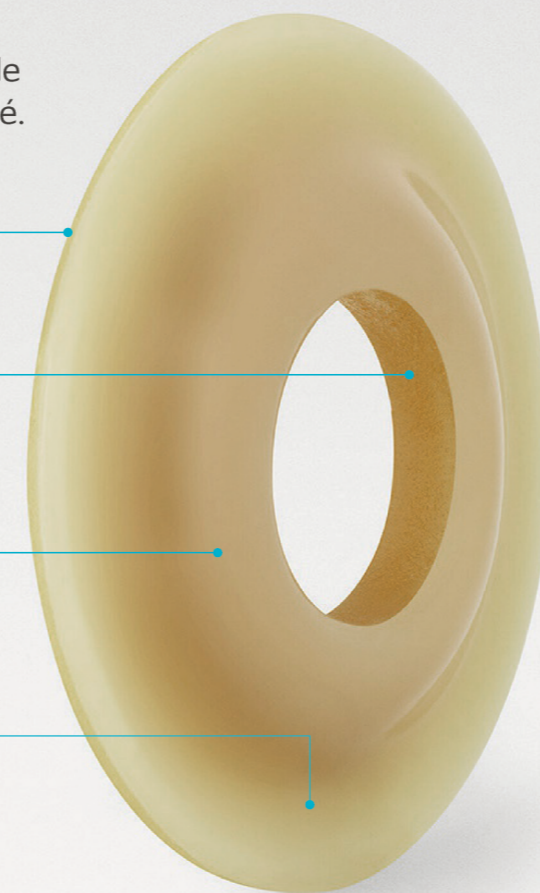

Une large gamme d'anneaux convexes


L'anneau protecteur convexe Brava® existe en différentes tailles qui peuvent s'adapter aux besoins de chaque patient. Il peut être utilisé avec toutes les formes de stomies, tout en conservant sa convexité⁹.

Stomie ronde ou ovale ?
Modelable aux différentes formes de stomies, y compris les stomies latérales (ovales) et terminales (rondes).

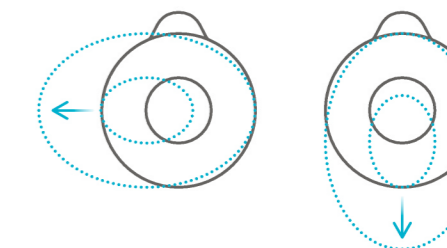

Disponible en différentes tailles pour une bonne adaptation

L'anneau protecteur convexe Brava est disponible en six diamètres différents avec des intervalles de 5 mm pour s'adapter à toutes les tailles de stomies.

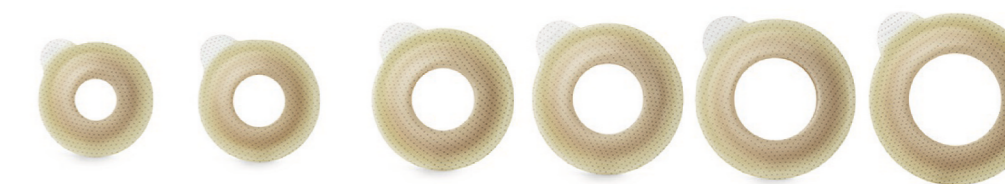

∅ Int.	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm
∅ Ext.	60 mm	65 mm	70 mm	75 mm	80 mm	85 mm

Conçu pour l'appareillage des stomies planes et rétractées



L'anneau protecteur convexe Brava offre une convexité personnalisée aux personnes ayant une stomie plane ou rétractée. Le bord central épais est conçu pour assurer la convexité de la zone péristomiale et la double couche adhésive prévient les fuites⁴ tout en réduisant l'humidité de la peau afin de maintenir une peau saine⁶.

Fonctionnement de l'anneau protecteur convexe Brava

1


L'anneau protecteur convexe Brava est placé autour de la stomie.

2

La double couche adhésive adhère immédiatement à la peau¹⁰.

3

La forme est conçue pour donner une convexité à la zone péristomiale.

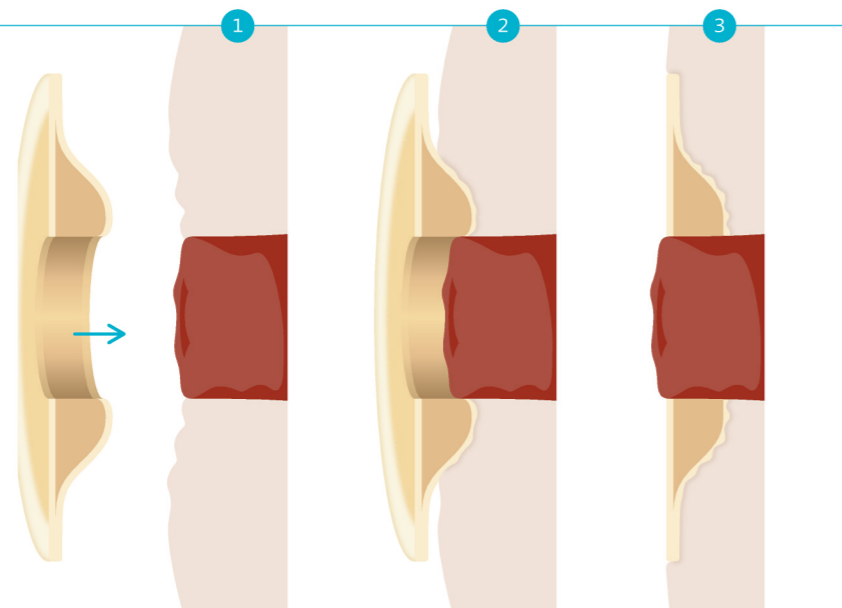

La gamme des anneaux protecteurs Brava permet de prévenir les fuites^{3,4} quelle que soit la morphologie du patient stomisé, la taille ou la forme de sa stomie



Anneau protecteur convexe Brava®

Boîte de 10 - Épaisseur 8 mm

Ø Int.	Ø Ext.	Réf.	GTIN
20 mm	60 mm	120901	5708932740777
25 mm	65 mm	120911	5708932740807
30 mm	70 mm	120921	5708932740838
35 mm	75 mm	120931	5708932740869
40 mm	80 mm	120941	5708932740890
45 mm	85 mm	120951	5708932740920



Anneau protecteur Brava®

Boîte de 10

Épaisseur	Ø Int.	Ø Ext.	Réf.	GTIN
2,5 mm	18 mm	48 mm	120351	5701780173919
2,5 mm	18 mm	64 mm	120381	5701780173940
2,5 mm	34 mm	64 mm	120391	5701780173957
2,5 mm	18 mm	76 mm	120321	5708932726559
4,2 mm	18 mm	48 mm	120451	5708932725255
4,2 mm	18 mm	64 mm	120481	5708932725286
4,2 mm	34 mm	64 mm	120491	5708932725323

L'anneau protecteur Brava® est destiné à assurer l'étanchéité entre la peau péristomiale intacte et la plaque de stomie, protégeant ainsi la peau des effluents de la stomie. Ce produit est destiné au remplissage des creux et plis de la peau péristomiale.

L'anneau protecteur convexe Brava® est destiné à assurer l'étanchéité entre la peau péristomiale intacte et le support adhésif pour stomie, protégeant ainsi la peau des effluents de la stomie. Le produit est conçu pour remplir les creux et plis de la peau péristomiale. Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d'une couverture complémentaire. Dispositifs médicaux de classe I, non stériles, marqués CE. Fabricant : Coloplast A/S. Attention, lire attentivement la notice d'instructions avant utilisation. Document réservé aux professionnels de santé.

1. Herlufsen P, Olsen AG, Carlsen B, Nybaek H, Karlsmark T, Laursen TN, Jemec GB. Study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. Br J Nurs. 2006 Sep 14-27;15(16):854-62. Page 1.
 2. Claessens I, et al. The Ostomy Life Study: the everyday challenges faced by people living with a stoma in a snapshot. Gastrointestinal Nursing. 2015 ; 13 (5) : 18-25. Enquête incluant 4138 patients stomisés (43% colo, 37% iléo et 18% urostomisés), le but de cette enquête était de mieux comprendre l'impact d'une stomie sur le quotidien des patients. • 3. Notice d'instruction de l'anneau protecteur Brava • 4. Notice d'instruction de l'anneau protecteur convexe Brava. Prévient les fuites en créant un joint étanche entre la peau péristomiale intacte et le support adhésif. • 5. Rationales for claims regarding Brava Protective Seal, Doc. No. VV-0105281, p3, Adhérence de l'adhésif de l'anneau protecteur Brava mesurée par analyse mécanique dynamique à haute fréquence. L'adhésif utilisé pour les anneaux protecteurs convexes Brava est identique à celui des anneaux protecteurs Brava. • 6. Verification Laboratory test, document number: VV-0290175, juin 2021. Absorption mesurée selon méthode interne TM0096 = mesure de la quantité d'eau absorbée après 2h. • 7. Clinical Evaluation report Brava Protective Seal VV-0109220. 135 participants colo, iléo et urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Mai 2016. Objectif : évaluer les performances de l'anneau protecteur Brava comparativement à l'anneau habituellement utilisé. 64% des iléostomisés et urostomisés ont évalué bonne à très bonne la durabilité de l'anneau protecteur Brava : IC 95% [0.524; 0.737]. Page 11. L'adhésif utilisé pour les anneaux protecteurs convexes Brava est identique à celui des anneaux protecteurs Brava. • 8. Rationales for claims regarding Brava Protective Seal, Doc. No. VV-0105281, p4, Elasticité et adhésivité de l'anneau protecteur Brava de l'adhésif mesurée à basse fréquence par analyse mécanique dynamique. L'adhésif utilisé pour les anneaux protecteurs convexes Brava est identique à celui des anneaux protecteurs Brava. • 9. Verification Laboratory test, document number: VV-0290175, juin 2021. Maintien de l'épaisseur lors de l'étirement mesurée selon méthode interne TM0070 = mesure de la différence d'épaisseur avant et après étirement. Test 7.2 • 10. Clinical Evaluation report Brava Protective Seal VV-0109220. 135 participants colo, iléo et urostomisés au DK, Allemagne, USA et Japon. Mai 2016. Objectif : évaluer les performances de l'anneau protecteur Brava comparativement à l'anneau habituellement utilisé. 86% des utilisateurs ont jugé l'adhésivité immédiate bonne ou très bonne (IC 95% [0.785; 0.909]). Table 4 page 12. L'adhésif utilisé pour les anneaux protecteurs convexes Brava est identique à celui des anneaux protecteurs Brava.

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée
 Siège social : Les Jardins du Golf - 6 rue de Rome - 93561 Rosny sous bois CEDEX - France
 Capital social : 22 001 980 Euros - RCS BOBIGNY : 312 328 362 - SIREN : 312 328 362
 SIRET : 312 328 362 00040 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362
pro.coloplast.com Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK-3050 Humlebaek.
 © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 27295 - PM-18341 - Septembre 2021 - PS



Nouveau

Anneau protecteur convexe Brava®

Conçu pour l'appareillage des stomies planes et rétractées

Anneau protecteur convexe Brava®